



1 ACTIVATION

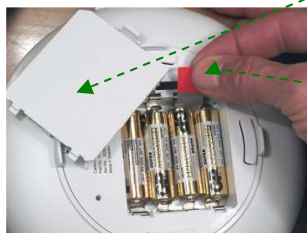


1. Retournez le **Carrousel**
2. Retirez la trappe d'accès au logement des piles.
3. Assurez-vous que les piles sont bien en place
4. Retirez la languette plastique rouge en maintenant la pile qui la coince
5. Quelques secondes après, l'appareil doit émettre un double « bip ».
6. Refermez la trappe.

2 OUVERTURE

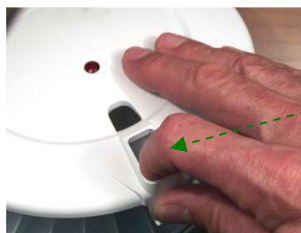

1. Remettez l'appareil à l'endroit et posez-le sur une surface plane ou dans votre main (de préférence).
2. Tout en appuyant fermement du pouce de l'autre main sur la patte située en face de l'orifice de récupération des médicaments, soulevez le couvercle avec l'index placé dans cet orifice, les autres doigts reposant sur le couvercle comme illustré..

3 PRISES

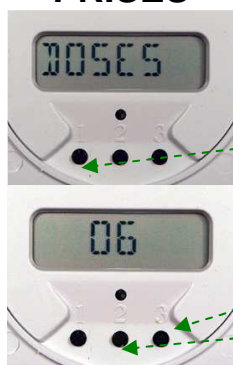

1. Un écran à cristaux liquides (LCD) apparaît, avec en dessous 3 boutons numérotés de 1 à 3.
2. Appuyez brièvement sur le bouton 1 : « DOSES » s'affiche alors, puis, après un court instant, « 00 ».
3. Choisissez le nombre de prises journalières en appuyant sur le bouton 3 pour l'augmenter, 2 pour le diminuer. Dans ce cas, « 6 ».

4 ALARMES




1. Appuyez à nouveau sur le bouton 1 : « ALARMS » s'affiche alors, puis, après un court instant, « 1 23:55 »
2. Choisissez l'heure de la première prise en appuyant sur le bouton 2 pour la retarder et sur le bouton 3 pour l'avancer. Dans ce cas, « 7h30 »
3. Une fois cette première prise programmée, appuyez brièvement sur le bouton 1 et répétez la même opération pour les 5 prises suivantes (exemple des 6 programmées à l'étape 3).

5 HORLOGE



1. Appuyez à nouveau sur le bouton 1 : « CLOCK » s'affiche, puis « 00 :xx », (clignotant).
2. Pour actualiser l'heure, utilisez le bouton 2 pour la retarder et le bouton 3 pour l'avancer (par mn avec un appui bref et par défilement continu en maintenant le bouton enfoncé). Ici, « 7h54 ».
3. Appuyez longuement sur le bouton 1 (ou attendez 30 secondes) : l'heure choisie s'affiche, avec le « : » central qui clignote.

6 DISQUE

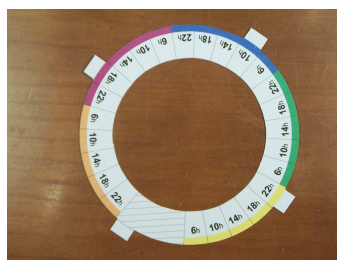

1. Prenez l'un des 2 disques vierges fournis (ou le disque personnalisé en option).
2. Inscrivez dans les cases du disque les heures de prise quotidiennes programmées à l'étape 4 en les répétant par journées entières autant de fois que possible. Dans notre exemple, pour 6 prises par jour, inscrivez les heures dans 6x4=24 cases, 4 cases non utilisées restant vierges (et les 4 cellules correspondantes sur les 28 ne devant pas être remplies).

7 REPLISSAGE



1. Une fois le disque en place sur le panier, remplissez les cellules correspondantes de ce dernier (pour plus de facilité, vous pouvez le retirer).
2. Placez le panier de sorte que la première prise de la journée se trouve **à droite** de l'orifice.
3. Fermez le couvercle : votre **Carrousel** est prêt à fonctionner.

8 SERVEZ-VOUS !



1. Lorsque l'alarme retentit, accompagnée d'un signal lumineux (s'il est programmé), saisissez l'appareil par le milieu et inclinez-le en versant les médicaments dans votre main. Un double bip doit alors retentir et l'alarme cesser.
2. Reposez le **Carrousel** : il se met en veille pour votre prochaine prise de médicaments.